

核酸電泳的好夥伴




MS major science
Innovative Life Sciences Tools

水平電泳槽舊機換新機， 最高折價 NT2,000


*凡購買電泳槽系統，可半價加購MP-100
手持式電源供應器 (100伏特)



- ✓ 單一壓模，一體成型製膠台
- ✓ 製膠容易，不需膠帶、夾具或彈簧
- ✓ 製膠Agarose需求量少
- ✓ 製膠台與製膠托盤(tray)可耐130°C高溫
- ✓ 有多種不同款式齒梳 (comb)可選擇：
小片膠 (寬5.2 cm)最多12個well，大片膠 (寬10.7cm) 最多25個well
- ✓ Well可配合8爪及12爪之tip間距，可一次加入多量樣品
- ✓ 製膠盤為深色背景，加樣容易
- ✓ 製膠盤側面具5 mm高度線，方便判斷厚度
- ✓ 底部具距離指示線，讓跑膠終止時間更加精確
- ✓ 少量緩衝液消耗
- ✓ 透明上蓋具備通風孔，避免水氣影響觀察
- ✓ 槽體與電源供應器隔離，不會有過熱影響
- ✓ 防觸電之安全連鎖蓋 (蓋上透明蓋再插上紅黑電源線)

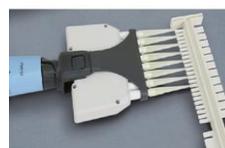

與多通道(8爪或12爪)相容

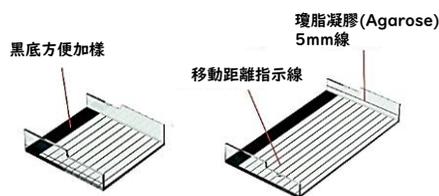

黑底方便加樣

瓊脂凝膠(Agarose) 5mm線

移動距離指示線

迷你水平電泳系統 MJ-105A


加長型迷你水平電泳系統 MT-108



CE



MJ-105A可搭配MBE-300藍光照透儀，可插入透明電泳槽下方，即時觀察樣品移動情形。再加上MBE-HOOD 紙製遮光罩，防止藍光造成眼睛傷害，且可用手機直接拍照。(或 MBE-LID-AM580 琥珀色濾片或 MJ-LID-AM580 附風扇之580nm 琥珀色濾片)

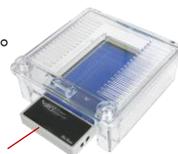

MBE-300



瑞柏生物科技股份有限公司

RAINBOW BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

0800-086-555 rainbow@rainbowbiotech.com.tw

北區 02-2811-8200 桃竹苗 03-666-0116 中區 04-2315-2922 南區 07-550-0680



瑞柏
官方帳號上線

ID: @rainbowbio

LINE